

Medicinblanding. Lille hætteglas. 13 mm

Til blanding af 1 hætteglas skal anvendes:


- Ecoflac Connect str. S
- Codan Guard Y-gren
- 1 stk 50 ml NaCl til priming + skyl
- 1 stk X-ml NaCl (Mængde medicin skal blandes i)

OBS: Ved 2 hætteglas (samme præparat) udføres 2 x af denne blanding. Der sættes 3-vejshane ved IV-adgangen og de 2 infusionssæt kan nu løbe ind samtidig.

- Stil NaCl på et bord (NaCl til medicinblanding)
- Påsæt Ecoflac connect
- Påsæt hætteglas
- Vend NaCl opad og pres NaCl ned i hætteglas.
- Når medicinen er opløst, vendes NaCl igen ned og medicinblandingen trykkes ned i væsken ved at klemme på NaCl-beholderen.



- ✓ Luk begge hvide klemmer på Y-grenen samt den blå rulleklemme.
- Påsæt 50 ml NaCl (skyllevæske) på den ene gren og medicinblanding på den anden gren.
- Åben hvid klemme ved NaCl (til skyl)
- Dråbekammer fyldes til streg (med NaCl skyllevæske) ved at klemme sammen om de blå gummitapper.
- Hele infusionslangen fyldes med NaCl (resten gemmes til efterskyl). Luk derefter igen hvid klemme.
- Åben hvid klemme ved medicinblanding. Indgiv medicinen og luk derefter igen hvid klemme.
- Åben hvid klemme ved skyllevæske.
 - Skyl sættet efter med NaCl (dråbekammer skal fyldes før det kan løbe. Klem igen på de 2 blå gummidutter.)

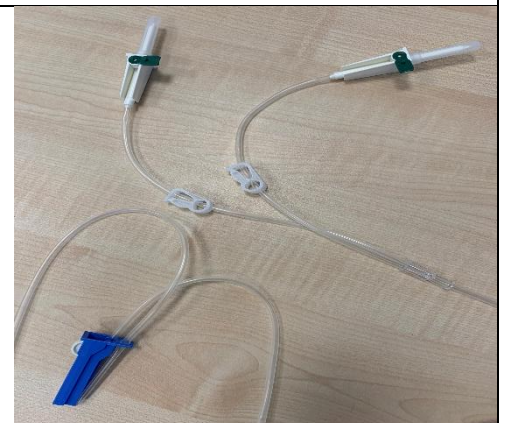

PS: Efter indgift skal IV-adgangen altid efterskylles med NaCl.